

Masques Transparents sans Latex Ambu®



Caractéristiques / Bénéfices

- Coquille transparente pour une surveillance continue de l'état du patient
- Support pour le pouce pour un confort de l'opérateur et une étanchéité maximale
- Matériaux confortables pour le patient
- Bourrelet détachable pour un nettoyage facilité
- Supporte un passage à l'autoclave à 134° C/ 18 min (sauf la taille 0A)
- Disponible en 7 tailles
- Taille zéro avec percée pour une ventilation inférieure à 40 cm H₂O

Masques Transparents sans Latex Ambu®

Le bourrelet gonflable des masques transparents Ambu est conçu spécialement pour que l'utilisateur puisse régler avec précision la pression du bourrelet et obtenir ainsi une étanchéité parfaite.

Les masques transparents avec bourrelet gonflable Ambu supportent un passage à l'autoclave à 134° C/18 minutes (procédure "prion").

L'ergonomie de la coquille (tailles 3/4,5 & 6) avec support pour le pouce garantit un maintien sécurisé pour

l'utilisateur et minimise les risques de fuites pendant la ventilation.

Le masque taille 0 avec percée est conçu pour une utilisation avec l'insufflateur Ambu Mark IV chez le petit enfant d'un poids inférieur à 15 kg (3 ans environ) ; la percée est exclusivement destinée à limiter la pression de ventilation à 4kPa (40 cmH₂O) et ne doit en aucun cas être utilisée pour une autre application.

Configurations Disponibles


Références	Descriptions
000 313 000	Masques Transparents sans Latex taille 0A Nouveau-né
000 314 000	Masques Transparents sans Latex taille 0 avec percée pour Bébé
000 315 000	Masques Transparents sans Latex taille 0 Bébé
000 316 000	Masques Transparents sans Latex taille 2 Enfant
000 312 000	Masques Transparents sans Latex taille 3/4 Adolescent
000 317 000	Masques Transparents sans Latex taille 5 Adulte
000 319 000	Masques Transparents sans Latex taille 6 Grand Adulte

Matériaux

Produit	Matériaux
Bourrelet	Silicone
Bourrelet taille 0A	Silicone avec mousse
Coquille	Polysulphone
Connecteur	Silicone

Taille

Tailles	Poids
0A Nouveau-Né	28 g
0 avec percée Bébé	39 g
0 Bébé	38 g
2 Enfant	63 g
3/4 Adolescent	78 g
4 Adulte	80 g
5 Grand Adulte	105 g

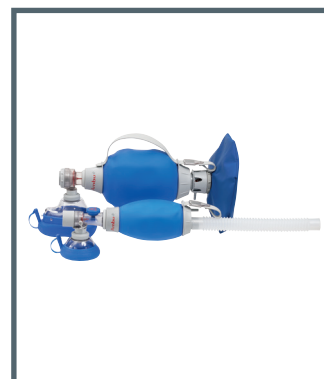

Masque Transparent sans Latex Ambu connecté à un insufflateur Ambu Mark IV



Masque Transparent sans Latex Ambu connecté à un insufflateur Ambu Silicone Oval Plus

Ambu sarl

Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33070 Bordeaux Cedex - France
Tél.: (33) 05 57 92 31 50
Fax: (33) 05 57 92 31 59
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr

Ambu BV

4, Rue de la Presse
1000 Bruxelles, Belgique
Tel.: +32 02 227 27 37
Fax: +32 02 218 31 41
www.ambubel.be

